

EN

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

DE

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

FR

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

ES

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

IT

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

PL

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana **UK** office: Ipswich **AU** office: Truganina
DE office: Hamburg **FR** office: Saint Vigor d'Ymonville **PL** office: Gdańsk

**USER'S MANUAL/MANUEL DE L'UTILISATEUR****JH10008**

Commode Chair / Chaise d'Aisance

Dear users:

- Thanks for buying our commode chair.
- Before use, please carefully read this instructions to ensure correct use.
- After reading, please keep the instructions for use properly and future reference at any time.


Product Introduction

- This product is an integrated multifunctional commode chair newly launched. By making return visits to regular customers, it is well designed by our designers for the elderly and people who have difficulty in moving. It can be put beside the bed and in the bathroom as a commode chair. The seat cushion and backrest are made of soft material and are comfortable to sit.
- The main structure of this commode chair is made of high-carbon steel with five adjustable height holes. The commode can be pulled out from the front and the back. More user-friendly design can solve the problems frequently encountered by the elderly in life.
- It uses thicker steel tube to satisfy the dependence and requirements of the elderly and pregnant women for commode chair. This foldable commode chair is really worth having.

Material: aluminium alloy+plastic

Sitting height: 17.7"~21.7" (from the seat cushion to the ground)

Net weight: 18lbs

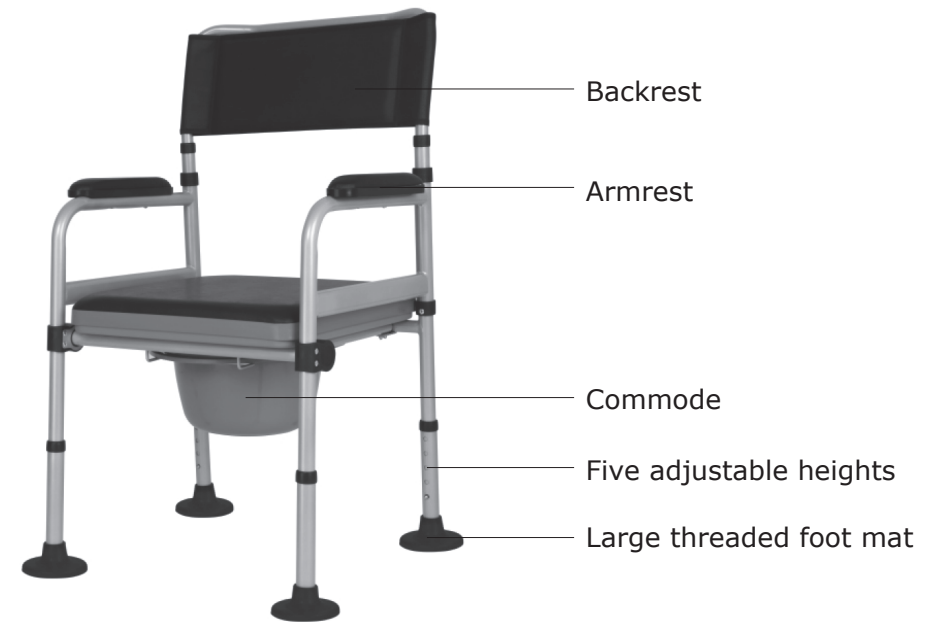

Installation & Use Method



1. Open the package and take out the product.



2. Rotate the two armrests back to unfold the chair. Hold the chair frame with one hand, press down the ball with another hand, and then insert the horizontal tube into the mounting base.



3. Press down the ball on the backrest tube with two hands at the same time, insert the backrest into the frame from both sides at the same time, and ensure that the ball head is completely exposed outside the hole.



4. Buckle the seat onto the horizontal tube of frame.



5. Put in the commode which can be pulled out from the front and the back.

Chers utilisateurs:

- Merci d'avoir acheté notre chaise d'aisance.
- Avant utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation correcte.
- Après lecture, veuillez conserver les instructions d'utilisation correctement et référence future à tout moment.


Présentation du Produit

- Ce produit est une chaise d'aisance multifonctionnelle intégrée nouvellement lancée. En rendant visite aux clients réguliers, il est bien conçu par nos concepteurs pour les personnes âgées et les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Il peut être placé à côté du lit et dans la salle de bain comme chaise d'aisance. Le coussin de siège et le dossier sont faits d'un matériau doux et sont confortables pour s'asseoir.
- La structure principale de cette chaise d'aisance est en acier à haute teneur en carbone avec cinq trous réglables en hauteur. La toilette peut être retirée de l'avant et de l'arrière. Une conception plus conviviale peut résoudre les problèmes fréquemment rencontrés par les personnes âgées dans la vie.
- Il utilise des tubes en acier plus épais pour répondre à la dépendance et aux exigences des personnes âgées et des femmes enceintes en matière de chaises d'aisance. Cette chaise d'aisance pliable vaut vraiment la peine d'avoir.


Matériau: alliage d'aluminium + plastique

Hauteur d'assise: 45 ~ 55 cm /17.7"~21.7" (du coussin de siège au sol)

Poids net: 8,2kg/18lbs

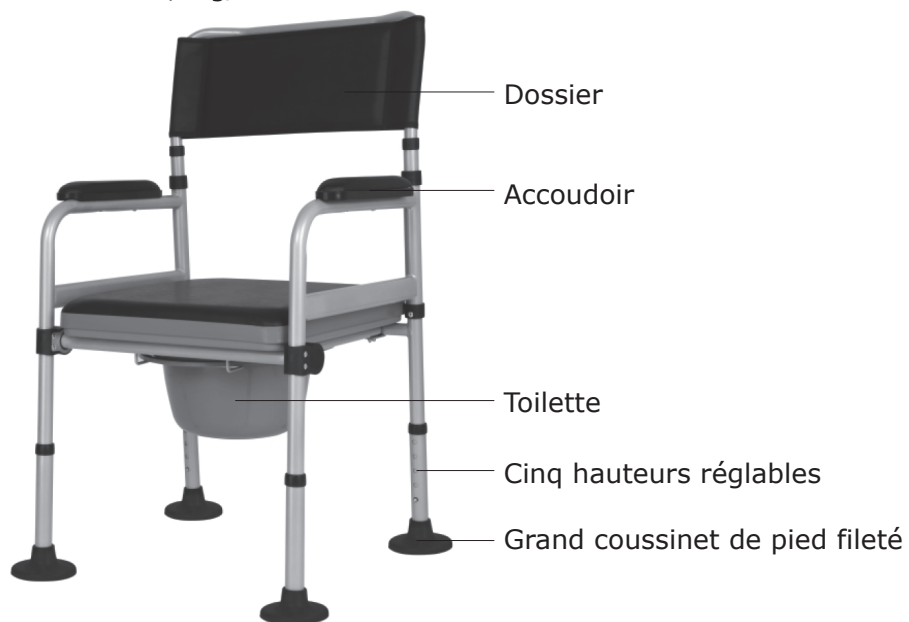

Méthode d'Installation et d'Utilisation

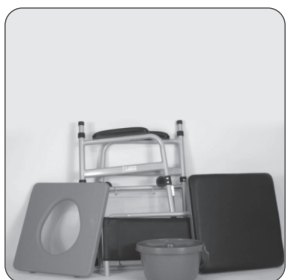

1. Ouvrez l'emballage et sortez le produit.



2. Faites pivoter les deux accoudoirs vers l'arrière pour déplier la chaise. Tenez le cadre de la chaise d'une main, appuyez sur la boule de l'autre main, puis insérez le tube horizontal dans la base de montage.



3. Appuyez sur la boule sur le tube du dossier avec les deux mains en même temps, insérez le dossier dans le cadre des deux côtés en même temps et assurez-vous que la rotule est complètement exposée à l'extérieur du trou.



4. Bouclez le siège sur le tube horizontal du cadre.



5. Installez la toilette qui peut être retirée de l'avant et de l'arrière.